



Pannello di controllo

Impostazione dell'irrigazione

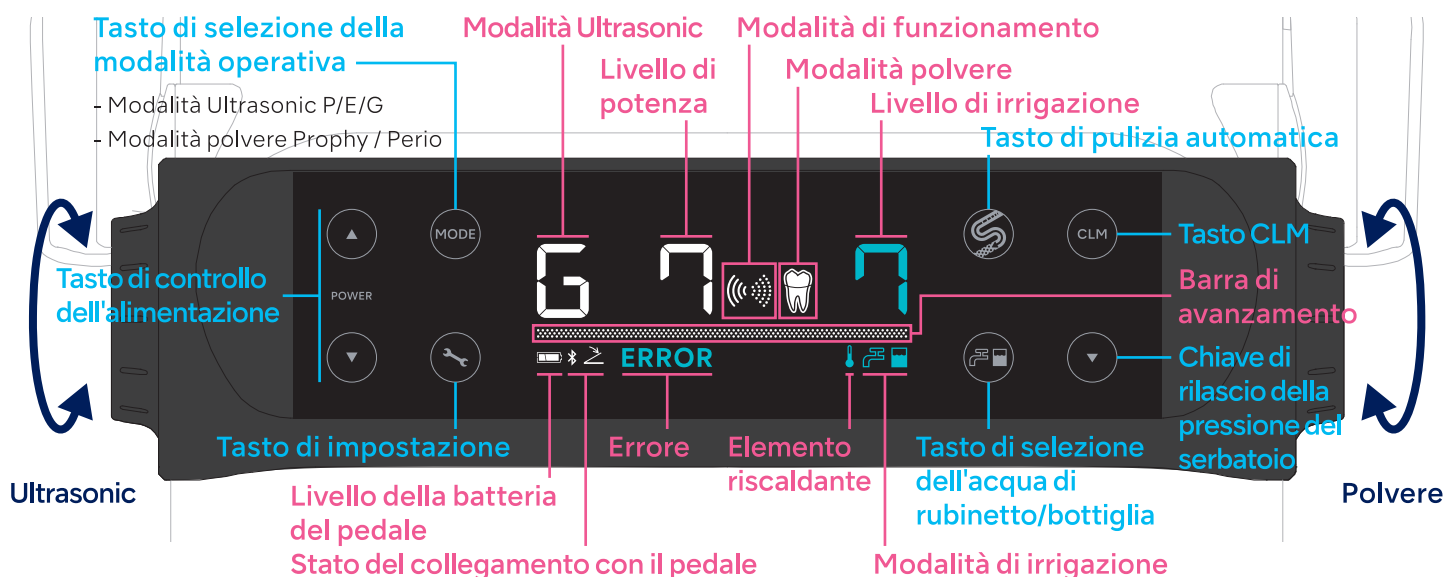


Pedale

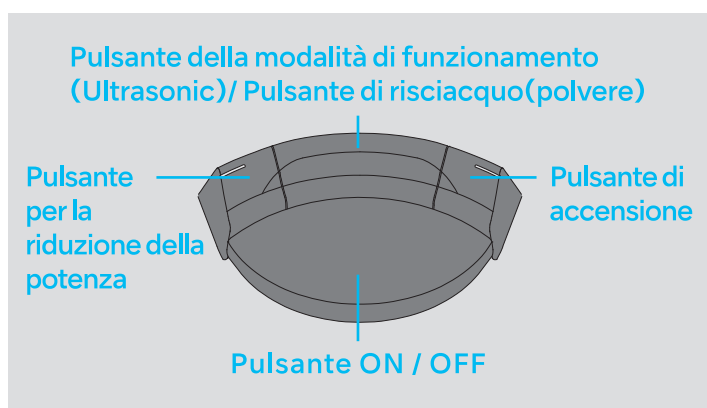

Utilizzo della modalità Ultrasonic


- 1 Impugnare il manipolo Ultrasonic.
- 2 Selezionare la modalità Ultrasonic (P/E/G).
- 3 Impostare il livello di potenza.
- 4 Selezionare il metodo di irrigazione.
- 5 Regolare il livello di irrigazione.
- 6 Premere il pulsante ON / OFF

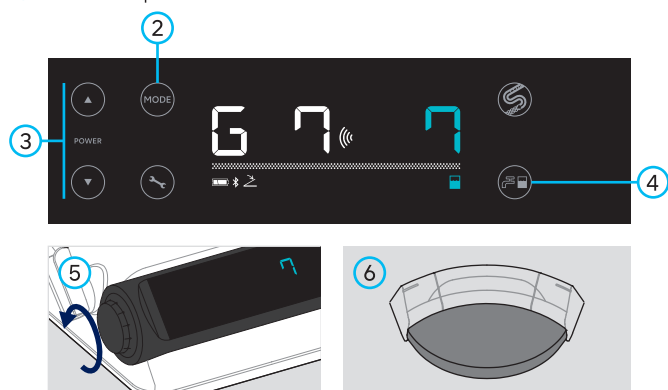

Utilizzo della modalità polvere

Modalità	Serbatoio	Manipolo	Puntale	Utilizzo	Polvere

- 1 Impugnare il manipolo polvere.
- 2 Selezionare la modalità polvere (Prophy / Perio).
- 3 Impostare il livello di potenza.
- 4 Regolare il livello di irrigazione.
- 5 Premere il pulsante ON / OFF.

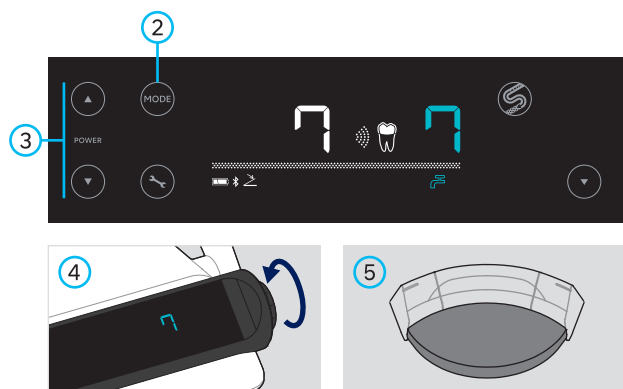

Pulizia automatica

	Frequenza di esecuzione delle modalità di pulizia automatica	Utilizzo effettivo di Varios Combi Pro2		
		Ultrasonic e Powder	Polvere Solo	Ultrasonic Solo
Modalità di pulizia automatica da attivare	Dopo ogni trattamento	W(Powder)	W(Powder)	—
	Una volta al giorno (dopo il trattamento finale)	D	P	W (Ultrasonic)

W (Ultrasonic) : Rimozione dell'acqua

W (Polvere) : Rimozione dell'acqua e della polvere di spurgo

P : Rimozione dell'acqua dal tubo del manipolo
Rimozione della polvere dal circuito della polvere
Rilascio della pressione del serbatoio

D : Rimozione dell'acqua dal cordone/tubo del manipolo
Rimozione della polvere dal circuito della polvere
Rilascio della pressione del serbatoio

Ultrasonic o polvere

3 s

Impostare il livello di irrigazione su 10. Toccare per 3 secondi, finché non viene visualizzato "AC".

W

Selezionare "W".

Manipolo Ultrasonic

Manipolo polvere

Quando appare "Fin", toccare .

P
D

Smaltire la polvere e collegare il serbatoio.

Selezionare "D" o "P".

Manipolo polvere
Manipolo Ultrasonic

Quando appare "Fin", toccare .

Decontaminazione / prevenzione della formazione di biofilm (Modalità CLM)

b.clean

Inserire la bottiglia CLM.

Tubo del manipolo
Cordone del manipolo

CLM 3s

Riempire la bottiglia CLM con b.clean (non diluito). Rimuovere il cordone / tubo del manipolo da ciascun manipolo e inserirlo nel supporto CLM. Toccare per 3 secondi, finché non appare la visualizzazione qui sopra.

CLM 3s

Toccare per 3 secondi, finché non si avvia la modalità CLM. Quando appare la visualizzazione qui sopra, spegnere l'alimentazione e attendere almeno 12 ore.

Accendere l'alimentazione. Rimuovere la bottiglia CLM.

Acqua potabile 300 mL

Riempire la bottiglia di irrigazione disinfettata con acqua potabile.

Inserire la bottiglia di irrigazione.

CLM 3s

Toccare per 3 secondi, fino all'inizio dello scarico. La modalità CLM è completa quando appare la visualizzazione sopra riportata. Toccare per passare alla visualizzazione normale.