

Varios Combi Pro2



NSK



32

motivi per scegliere il Varios Combi Pro2

Dopo aver ascoltato le esigenze di un'ampia gamma di professionisti del settore dentale, abbiamo creato un dispositivo combinato che offre le funzionalità avanzate di cui i clinici di oggi hanno davvero bisogno.

Combinando la terapia con polveri subgengivali e sopragengivali, insieme allo scaling ad ultrasuoni per i trattamenti parodontali, il Varios Combi Pro2 è stato ideato per essere facile da usare e adattarsi al tuo stile di trattamento preferito.

Nato dalla nostra ampia esperienza e ricerca, il Varios Combi Pro2 offre la qualità professionale che ti aspetti da NSK. Grazie alla sua lunga durata e semplice manutenzione, è il compagno ideale per l'uso quotidiano, che consente di svolgere le attività cliniche di routine in modo fluido ed efficiente, senza interruzioni.

Con NSK al tuo fianco, hai gli strumenti per offrire sempre il massimo - garantendo un'assistenza efficace e continua, dalla prevenzione al trattamento, per ogni paziente, ad ogni seduta.

SCALER AD ULTRASUONI

Serbatoio dell'acqua facile da rimuovere

Per garantire la massima praticità e comodità, il serbatoio dell'acqua si rimuove e si riaggancia con estrema facilità.

Manipolo scaler in titanio dal design sottile

Dotato del primo scaler ad ultrasuoni al mondo realizzato in **titanio puro**. La nostra esclusiva finitura **DURAGRIP** assicura un'ottima presa e stabilità durante l'utilizzo, mentre la luce LED integrata offre una visibilità ottimale.

Flusso d'acqua regolabile

Grazie al selettore dedicato, regolare l'erogazione dell'acqua non è mai stato così semplice.

Ogni selettore è progettato per ottimizzare le funzionalità dello scaler ultrasonico e della terapia con polveri, garantendo massima efficienza e comfort durante l'uso.

Riscaldamento dell'acqua

Per un'esperienza ancora più delicata e piacevole, sia lo scaler ultrasonico che il manipolo delle polveri erogano acqua riscaldata, assicurando il massimo benessere al paziente durante ogni trattamento.

TERAPIA DELLE POLVERI

Unità e camera indipendenti

La nostra unità per la polvere è progettata in modo esclusivo per essere separata dall'unità principale. È pensata per durare nel tempo e per essere di facile manutenzione, garantendo un flusso di lavoro fluido e senza interruzioni nella pratica clinica quotidiana.

Puntale a getto per manipolo Perio

Il puntale a getto del manipolo Perio consente di effettuare trattamenti precisi e mirati, sia a livello gengivale che sopragengivale.

Manipolo per la terapia delle polveri, con puntale sottile

Il nostro puntale sottile consente un facile accesso alle aree difficili da raggiungere o da individuare.

Pannello smart-display

Con il pannello smart-display tutto-in-uno, vengono visualizzati esclusivamente i comandi essenziali per la procedura in corso, per un trattamento preciso e un utilizzo intuitivo.

SEMPLICITÀ CHE FUNZIONA

SCALER AD ULTRASUONI



Scaler ad ultrasuoni


Progettato per durare. Pensato per il comfort.

In NSK, la qualità non è un optional – è la nostra firma. Il manipolo ad ultrasuoni NSK incarna il perfetto equilibrio tra ergonomia raffinata e performance ineguagliabile, pensato per professionisti che rifiutano i compromessi.

Varios Combi Pro2 presenta il primo manipolo ad ultrasuoni al mondo in puro titanio, nato per vincere ogni sfida: resiste alle alte temperature, non teme i più aggressivi prodotti chimici ed è progettato per affrontare innumerevoli cicli di riprocessamento e di sterilizzazione in autoclave.

Inoltre, per garantire una presa e una stabilità eccellenti, il manipolo è rifinito con l'esclusivo rivestimento **DURAGRIP**, lo stesso utilizzato nella linea premium dei manipoli NSK.

Elegante, durevole, perfettamente bilanciato e ultraleggero: questo ablatore è studiato per offrire massima comodità e performance durature.

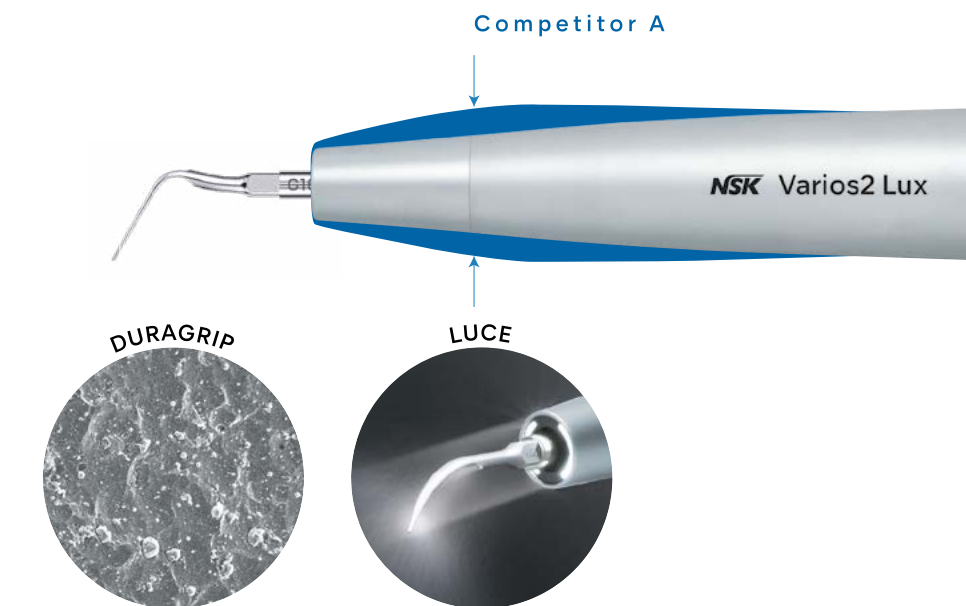

TERAPIA DELLE POLVERI

Terapia delle polveri

Puntali sottili e intercambiabili.


I nostri manipoli e puntali per il trattamento a base di polveri sono progettati per semplificare il vostro lavoro e renderlo più efficiente:

- L'accesso alla zona molare è facilitato dai puntali lunghi e stretti.
- Manipoli e puntali dal design sottile offrono un'eccellente visibilità e maneggevolezza all'interno del cavo orale.
- Viene favorito inoltre l'ingresso linguale con un'apertura della bocca minima, per offrire massimo comfort per te e per il tuo paziente.
- I puntali sono completamente sostituibili direttamente presso il riunito, per una manutenzione semplice e interventi rapidi.



Puntale a getto - manipolo perio per il trattamento delle polveri

Dall'ascolto diretto dei professionisti nasce il nuovo puntale a getto per il manipolo perio, specificamente progettato per trattamenti sopragengivali di precisione. Questa innovativa soluzione completa la nostra gamma affiancandosi al puntale Perio esistente, creando così un sistema duale che permette di scegliere di volta in volta il puntale più adatto alla specifica area da trattare.

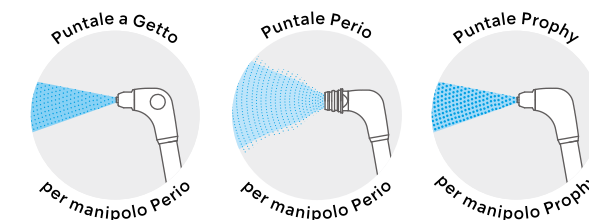


Continuità operativa



Unità indipendente e camere separate

La vera innovazione si misura quando la tecnologia lavora per la tua continuità operativa. Nel Varios Combi Pro2, ogni componente è pensato per garantirti un funzionamento ininterrotto:

Tutte le linee di conduzione della polvere (camera, tubi e manipoli) sono completamente autonome rispetto all'unità principale. Nel caso di un'eventuale ostruzione, ogni parte si smonta a mano in pochi secondi, senza necessità di inviare l'intero dispositivo alla casa madre o al fornitore per la riparazione.

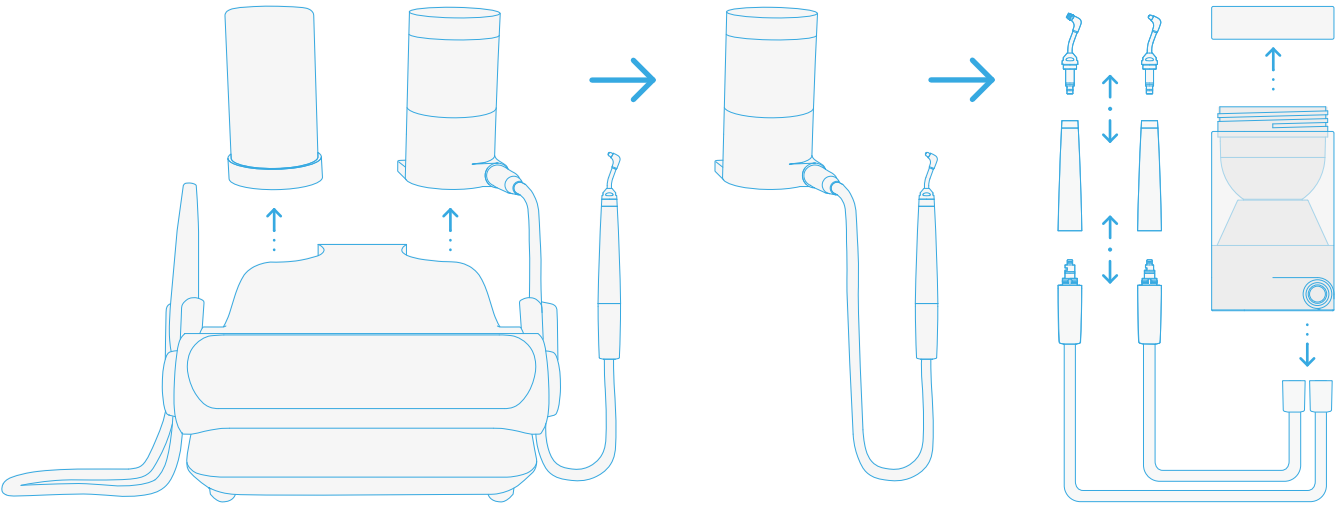

L'interno dell'unità principale racchiude solo l'essenziale: circuiti aria ed acqua, niente complicazioni superflue.



Nessuna manutenzione ordinaria richiesta

Dimentica la manutenzione programmata: Varios Combi Pro2 è progettato per una gestione autonoma da parte dell'igienista, senza bisogno di interventi tecnici routinari.

E se servisse assistenza, il nostro team è sempre a disposizione e pronto ad aiutarti. Perché il tuo studio non deve mai fermarsi!

Facile manutenzione

Auto-Pulizia



Il Varios Combi Pro2 è dotato di 4 modalità di auto-pulizia, attivabili (secondo necessità) dopo ogni trattamento o a fine giornata.

Una tecnologia che elimina la necessità di utilizzare numerosi altri strumenti, riducendo al contempo il rischio di ostruzioni dovute alla polvere e agli accumuli d'acqua. Ciò mantiene il dispositivo sempre pulito e pronto all'uso.



Auto-pulizia
Polvere



Auto-pulizia
Polvere



Auto-pulizia
Scaler ad ultrasuoni



Auto-pulizia
Doppia funzione



Modalità CLM



La pulizia del circuito idrico non è mai stata così semplice e sicura. Grazie alla modalità CLM e alla soluzione b.clean, il Varios Combi Pro2 garantisce una sanificazione completa e conforme agli standard europei, senza procedure complicate.

Come ulteriore misura di sicurezza, l'unità è programmata per impedire l'utilizzo fino al completo drenaggio della soluzione chimica.

Comfort del paziente

Sistema di riscaldamento dell'acqua




Il Varios Combi Pro2 è dotato di un sistema di riscaldamento del circuito dell'acqua, sia per l'ablatores a ultrasuoni sia per il manipolo delle polveri. La temperatura dell'acqua erogata, mantenuta approssimativamente uguale a quella del cavo orale, garantisce un'esperienza di trattamento più confortevole, anche per i pazienti con sensibilità dentale.

Operatività

Pedale wireless multifunzione

Posiziona il pedale di controllo nel punto più comodo per te, senza vincoli legati alla lunghezza dei cavi o alla gestione dei fili.

Il pedale del Varios Combi Pro2 si connette via Bluetooth®, offrendo un utilizzo pratico e senza pensieri grazie alle sue opzioni multifunzione, consentendoti di concentrarti completamente sul trattamento in corso.

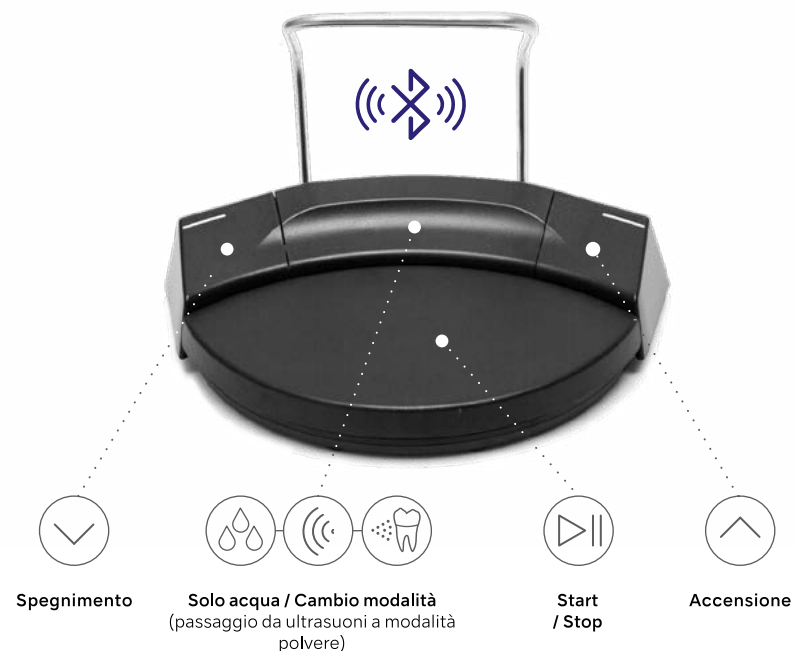

iCart Prophy2 con il kit del serbatoio dell'acqua*

Il nostro carrello dedicato introduce una nuova dimensione di praticità e semplicità d'uso.


Può essere dotato di un sistema di alimentazione indipendente dell'acqua, pertanto, combinando il Varios Combi Pro2 con l'iCart Prophy2, è possibile trattare i pazienti in ambienti dove la disponibilità o la qualità dell'acqua esterna rappresentano un limite.



*Il serbatoio dell'acqua è opzionale

Ampia gamma di inserti per scaler ad ultrasuoni

La nostra vasta gamma, con oltre 70 tipi di inserti per ablatore a ultrasuoni, rende il dispositivo adatto ad un'ampia selezione di applicazioni cliniche, dalla profilassi alla terapia di diverse patologie dentali.

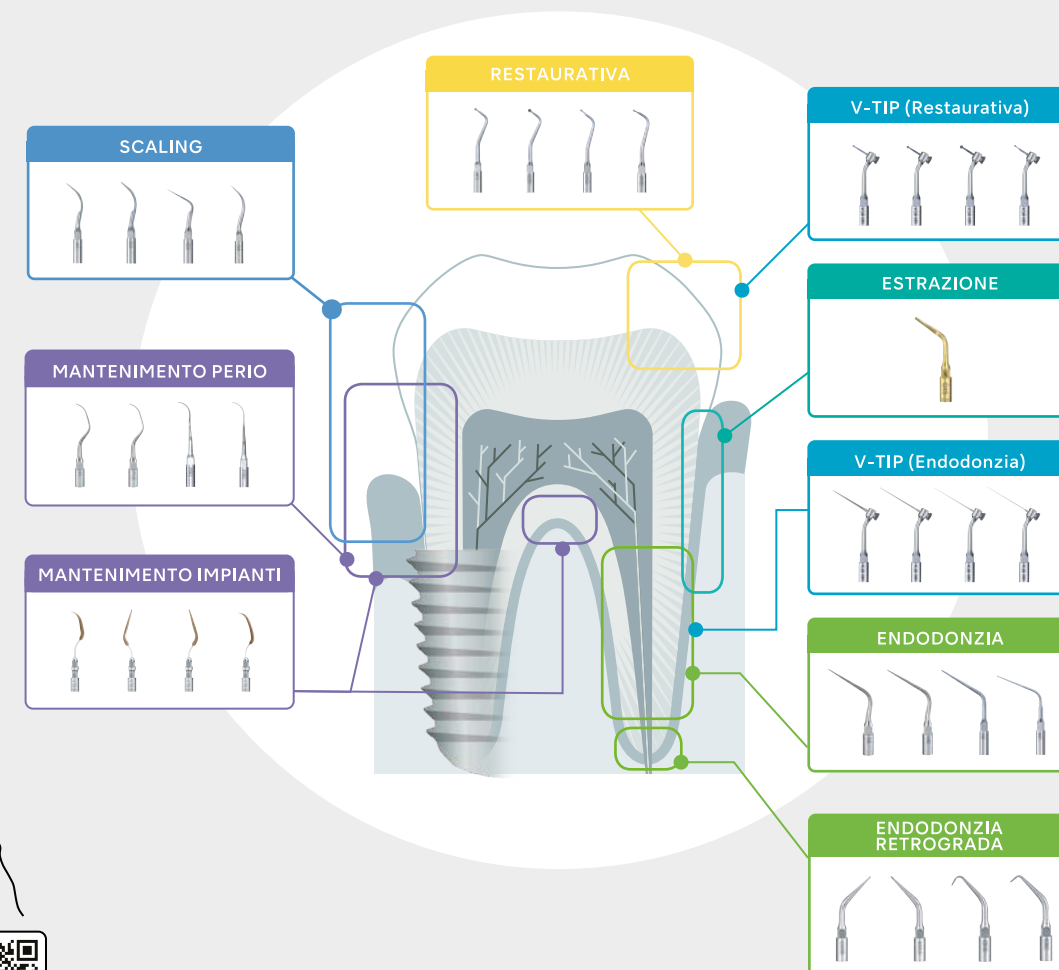

Scannerizza il QRcode e scopri la nostra intera gamma di punte ultrasoniche

Link: https://www.italy.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/oral-varios_ultrascaler_tips/

POLVERI



POLVERI

Per denti belli e sani a lungo

La terapia delle polveri elimina in modo efficace le macchie sottogengivali e sopragengivali, così come il biofilm. Sfruttando i protocolli e i vantaggi del Varios Combi Pro2, puoi dare inizio a una nuova era nell'igiene orale professionale: risultati eccellenti, senza pensieri per te e con la massima tranquillità per i tuoi pazienti.

FLASH pearl

Polvere per Air Polishing adatta all'uso sopragengivale, con particelle sferiche che agiscono delicatamente sulla superficie dentale.

Indicazioni d'uso: rimozione di macchie ostinate.

Ingrediente principale: Carbonato di calcio

- non contiene cloruro di sodio (senza sapore salato)
- adatta per pazienti con una dieta a basso contenuto di sodio



Dimensione media delle particelle:
54µm



MODELLO	CODICE
FLASH Pearl 300g flaconi x 4	Y900698

SOFT pearl

Polvere per Air Polishing adatta all'uso sopragengivale, a bassa invasività superficiale. Adatta anche all'uso con alcuni dispositivi protesici.

Indicazioni d'uso: rimozione del biofilm e di macchie moderate.

Ingrediente principale: Glicina

- non aromatizzato
- sapore dolce



Dimensione media delle particelle:
65µm



MODELLO	CODICE
SOFT Pearl 250g flaconi x 4	Y1500721


Perio Mate Powder

Polvere per Air Polishing adatta all'uso sottogengivale e nel margine gengivale.

Indicazioni d'uso: rimozione del biofilm e di macchie lievi.

Ingrediente principale: Glicina

- non aromatizzato
- sapore dolce
- altamente solubile in acqua, non si accumula nemmeno se usato in zona sottogengivale

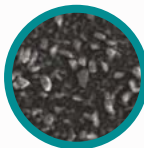






Dimensione media delle particelle:
25µm



MODELLO	CODICE
Perio Mate Powder 160g flaconi x 2	Y900938

Terapia delle polveri

Polvere + puntale: combinazioni e usi

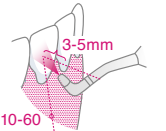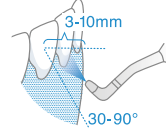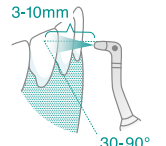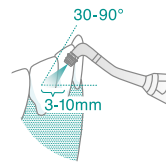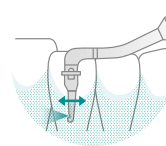MODALITÀ	KIT POLVERE	MANIPOLO	PUNTALE	UTILIZZO	POLVERE
MODALITÀ PROPHY 	PER TRATTAMENTI PROPHY 		 Puntale (per uso Propy)		
			 Puntale (per uso Propy)		
MODALITÀ PERIO 	PER TRATTAMENTI PERIO 		 Puntale a Getto (per uso Perio)		
			 Puntale (per uso Perio)		
			 Puntale + Inserto (per uso Perio)		

MIT

Minimally Invasive Therapy

Con il Varios Combi Pro2 è possibile eseguire la Terapia Minimamente Invasiva (MIT) di NSK - aiutando ogni eroe dell'igiene orale a dare il meglio di sé.

Completa lo STEP 1, lo STEP 2 e lo STEP 4 del protocollo MIT, utilizzando l'ablatore ad ultrasuoni e la terapia delle polveri, per trattamenti sopragengivali e sottogengivali.



NSK si impegna a garantire un'igiene orale di qualità, sviluppando prodotti intuitivi e pratici per l'uso quotidiano.

Varios Combi Pro2

Set Base



OTTICO	MODELLO	CODICE
●	Varios Combi Pro2 Set Base	Y1500505

- Contiene:**
 - Unità di controllo Varios Combi Pro2
 - VA2-LUX-HP Ti
 - VA2-LUX-SC Ti
 - Camera Propy2
 - Cordone Propy2
 - Manipolo per polveri (Propy)
 - Pedale wireless
 - Gancio
 - Tubo dell'aria
 - Tubo dell'acqua
 - Cavo di alimentazione
 - Serbatoio per irrigazione
 - Serbatoio CLM
 - Inserti per ablatore a ultrasuoni
 - Polvere FLASH Pearl (300 g)
- Specifiche:**
 - Dimensioni: L 249 x P 290 x H 115 mm (incluse le camere)
 - Peso: 3,5 kg
 - Alimentazione: CA 220-240 V 50/60 Hz
 - Frequenza (ultrasuoni): 28-32 kHz
 - Potenza massima (ultrasuoni): 11 W

Opzionale



MODELLO	CODICE
Propy Kit2	Y1500469

- Contiene:**
- Camera Propy2
 - Cordone Propy2
 - Manipolo per polveri (Propy)
 - Polvere FLASH Pearl (300 g)
- * Incluso nel set base Varios Combi Pro2.



MODELLO	CODICE
Perio Kit2	Y1500470

- Contiene:**
- Camera Perio2
 - Cordone Perio2
 - Manipolo per polveri (Perio)
 - Puntali Perio (40 pezzi)
 - Strumento per rimuovere i puntali Perio Mate
 - Polvere Perio Mate (160 g)

Articoli opzionali

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- iCart Propy2**
Dimensioni: H 840 mm
Peso: 16 kg
-
- S9098**

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- VA2-LUX-HP Ti**
-
- EA1203X050**

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- B.clean**
(1L flaconi x 6)
-
- BCL600**

Parti di ricambio

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- Puntale**
(per uso Propy)
-
- T1074012**

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- Serbatoio per irrigazione**
(kit serbatoio dell'acqua)
-
- ZA16160001**

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- Kit del serbatoio dell'acqua**
-
- Y1500719**
- Contiene:**
 - Serbatoio per irrigazione
 - Serbatoio CLM
 - Strumento di pulizia

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- Manipolo per terapia delle polveri**
(per uso Propy)
-
- T1074001**

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- CLM Module Set**
-
- Y1500740**
- Contiene:**
 - Accessorio CLM Perio
 - Accessorio CLM Propy

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- Manipolo per terapia delle polveri**
(per uso Perio)
-
- T1077001**

MODELLO	PRODOTTI	CODICE
---------	----------	--------

- Puntale a Getto**
(per uso Perio)
-
- TA10770106**



Lavabile nel
termodisinfectore



Autoclavabile

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK Dental Italy S.r.l. www.nsk-italy.it
Via dell'Agricoltura 21, 36016 Thiene VI, Italy

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Create it 